

Chantal

Genesis Walker



Imagem ilustrativa.

Genesis Walker

Nem todas as botas imobilizadoras são criadas da mesma forma.

Inspirada na tecnologia e design de calçados esportivos, a bota imobilizadora Genesis Walker proporciona uma caminhada saudável e natural através de uma tecnologia biomecânica. O resultado é uma bota imobilizadora que se assemelha ao sapato normal, permitindo a recuperação com o mínimo de interrupção nas tarefas diárias.



A leve e discreta Genesis Walker revoluciona o conforto, a facilidade e controle de locomoção do usuário.

As vantagens da Genesis

Conforto a cada passo

A Genesis Walker é a mais leve e completa bota imobilizadora pneumática do mercado.

Projetada para fornecer força quando necessário, enquanto elimina o peso extra.



Tecnologia Dynamic Air Stride

Semelhante ao tênis esportivo, a Genesis Walker utiliza uma câmara de ar dinâmica na sola do calcanhar, que absorve ativamente o impacto e permite uma experiência mais confortável na caminhada.

Pés felizes, corpo saudável

Largura estreita do calcanhar

Quanto maior a largura do calcanhar, mais força pode ser transferida para a articulação do joelho. O sistema de calcanhar da Genesis Walker é projetado para representar a largura de um sapato comum, tornando a caminhada mais fácil.



Largura do calcanhar da bota Genesis

Largura do calcanhar das outras botas do mercado

Imobilizador removível

A Genesis Walker pode ser ajustada de acordo com o tamanho da panturrilha do paciente. A linha de corte permite que a bota possa acomodar uma panturrilha maior.



Linha de corte



Altura do salto e largura adequada reduzem a inclinação pélvica e a dor secundária no joelho.

Salto baixo

A Genesis Walker tem o salto mais baixo do mercado, comparável a um sapato padrão*. A altura irregular do salto de algumas botas pode causar inclinação pélvica, resultando em dor secundária no quadril e nas costas. Por ter um salto comparável a um sapato padrão, a Genesis Walker reduz a inclinação pélvica, ajudando a reduzir essas dores secundárias.

* O sapato padrão é definido como um sapato masculino padrão, com a altura do salto aproximada de 2,54cm.

Comfort

Maneuverability


Caminhe normalmente enquanto se recupera

O design prático da Genesis Walker possui aparência discreta. Isso reduz a sensação de volume no pé e torna a caminhada mais fácil.

Design de sola projetada

Curvatura da superfície inferior da sola

A Breg estudou os componentes de uma caminhada normal. A curvatura da sola promove uma caminhada mais natural, pois se assemelha à ação de um tornozelo saudável durante as fases da caminhada, uma vez que que o tornozelo está imobilizado pela bota.

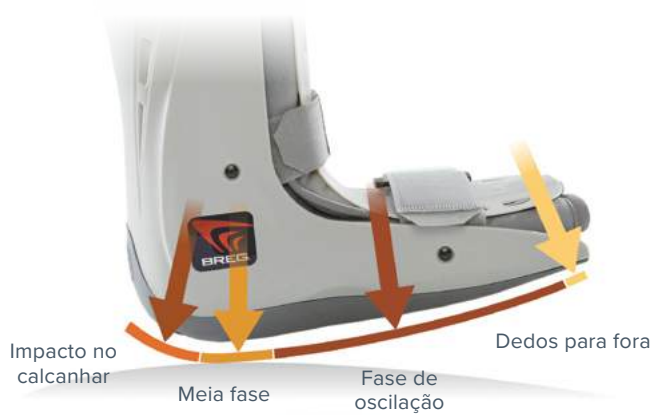

Sola antiderrapante

O design da sola, semelhante a um calçado esportivo, proporciona tração em uma variedade de superfícies, o que permite melhor locomoção.

Control

Desempenho garantido

A Genesis Walker oferece controle, suporte e proteção ao pé e tornozelo, do momento da lesão até a recuperação completa.

Câmara dupla de ar

Duas câmaras de ar idênticas fornecem compressão do pé ao tornozelo, mantendo-o em posição correta, o que permite um aumento no controle e conforto enquanto a recuperação ocorre.



Sistema pneumático integrado

Desenvolvida com câmaras de ar

As câmaras de ar integradas permitem ao usuário diminuir ou aumentar a pressão ao redor do pé e tornozelo. O sistema de bomba integrado elimina a necessidade de bomba manual.

Revestimento rígido

O design do revestimento rígido possui a combinação funcional do gesso com a conveniência de uma bota imobilizadora. Também permite ajustes para casos de edema e checagem do pé e tornozelo. O revestimento fornece maior proteção para uma lesão no período de recuperação. A placa anterior imobilizadora também pode ser removida para verificação do pé e tornozelo ou troca de curativos.



Genesis Walker Curta

Utilizando a mesma tecnologia da Genesis Walker Longa, o modelo curto é projetado para o máximo conforto, facilidade e controle de locomoção em um tamanho mais compacto.

Grandes produtos, pequenas embalagens

Com o mesmo design da Genesis Walker Longa, a Genesis Walker Curta fornece o suporte ideal com impacto mínimo.



Design curto

25% mais curta que o modelo longo, a Genesis Walker Curta é discreta e ultraleve.

**A mais leve e completa
bota imobilizadora
acabou de ficar ainda
mais leve.**

Borda
alargada
confortável

Ultraleve

Dupla
câmara
de ar

Bomba de ar
integrada

Câmara
de ar no
calcanhar

Menor
elevação

Código	Tamanho	Tam. do calçado	Produto
BL514003	P	33-35	Genesis Walker Longa
BL514005	M	35-39	Genesis Walker Longa
BL514007	G	39-43	Genesis Walker Longa
BL514009	GG	43+	Genesis Walker Longa
BL525003	P	33-35	Genesis Walker Curta
BL525005	M	35-39	Genesis Walker Curta
BL525007	G	39-43	Genesis Walker Curta