

Chantal

Jewett Sternotech



ORLIMAN®

Jewett Sternotech®

J001AG

CINZA



SEM LÁTEX



Mais leve



Funcional



Confortável



Livre de látex

► Características

Suporte de hiperextensão com três pontos de apoio: suprapúbico, dorsolumbar e esternal; estrutura leve de alumínio (usada na indústria aeronáutica) com design único e inovador. Sistema incorpora um novo suporte tridimensional torácico, trabalhando com um movimento de 3 eixos no produto na região de inclinação, que permitem uma adaptação perfeita ao tórax, proporcionando extensão elástica completa. Esse novo suporte, mais confortável, melhora significativamente a adaptação do produto ao corpo do paciente, minimizando os impactos dolorosos que podem influenciar no uso da órtese para o tratamento prescrito. O suporte pélvico articular permite maior conforto enquanto sentado e pode ser ajustado em um ângulo específico. Seu sistema de fechamento é muito seguro, rápido e fácil de usar.


► Efeitos

- Hiperextensão da coluna por meio de um sistema de três pontos de apoio
- Descarga mecânica dos corpos vertebrais da região torácica inferior e lombar alta
- Estabilização e restrição de movimentos da coluna vertebral
- Alívio da dor


► Indicações

- Fraturas por compressão
- Espondilartrose
- Imobilização em médio prazo após cirurgia de disco intervertebral
- Fraturas vertebrais estáveis da coluna dorsal inferior e da coluna lombar
- Imobilização temporária pós-cirúrgica de fraturas de corpos vertebrais instáveis
- Imobilização permanente após a cirurgia de tumores e metástases dos corpos vertebrais
- Pós-cirúrgico por descompressão com ou sem fixação interna

O novo Jewett Sternotech® possui avançado ajuste tridimensional na área torácica, tornando-o único no mercado.

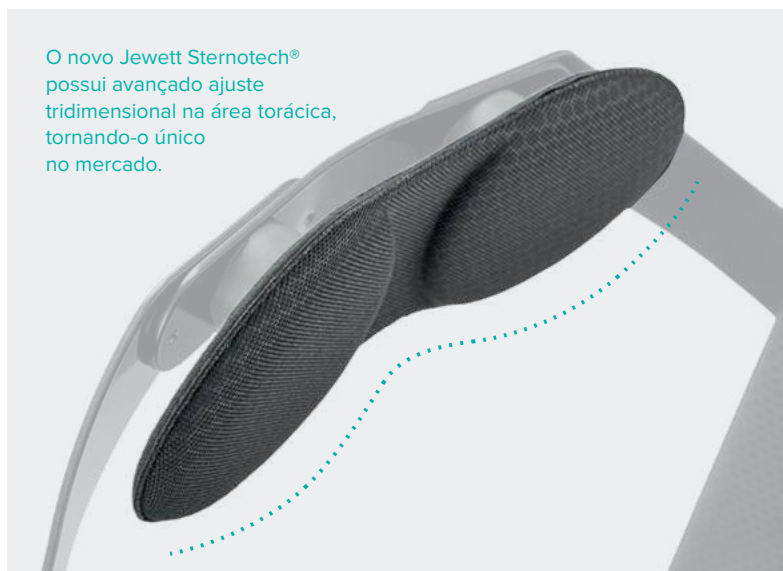

Three-Dimensional
Adjustment
Technology

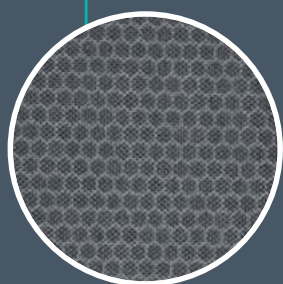

Tecido de espuma multicelular

Todo o preenchimento superior é feito de tecido de espuma termoformado para maior conforto e pode ser facilmente removido devido ao seu sistema de fixação de Velcro.



Sistema de fechamento

Sistema de fechamento oculto que impede abertura ou desencaixe acidental devido a fricção.




Modelo projetado para permitir que o ângulo da área torácica seja ajustado em cinco posições diferentes em complemento de 20°.




Apoio pélvico pode ser definido para três posições complementares de 20°.

SUPOORTE DORSOLOMBAR

Devido a esse sistema, o paciente pode optar por posicionamento vertical ou horizontal para maior conforto.

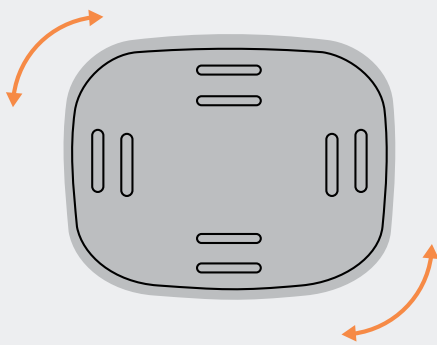

HORIZONTAL

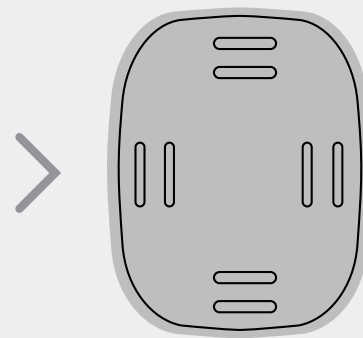

VERTICAL

(Para múltiplas fraturas ou melhor conforto)



*Medir entre o tórax e o púbis.

| Tamanho | Circunferência pélvica | Altura* |
|---------|------------------------|---------|
| 1 | 60-75 | 39-46 |
| 2 | 75-90 | 42-49 |
| 3 | 90-105 | 45-52 |
| 4 | 105-115 | 49-56 |



ORLIMAN®

Fábrica & Distribuidora / Escritório & showroom

Rua Marinho de Carvalho, 101
Conceição, Diadema - SP
09921-005

11 3201 1155

sac@chantal.com.br
www.chantal.com.br
Siga-nos: @grupochantal